


# SURGICAL SMOKE EVACUATION SOLUTIONS



# SURGICAL SMOKE EVACUATORS

## VisiClear

- ・ 3つのモード (Open Tubing Mode/Electrosurgical Pencil Mode/Laparoscopic Mode) を選択可能で、異なる手技に対してより最適な排煙環境をご提供します。
- ・ 静音な動作を実現します。
- ・ コンパクトで、収容しやすいデザインになっております。
- ・ チューブ内で閉塞が発生した際、警告音と画面表示にてお知らせする安全機能が設定されています。(Open Tubing Mode、Electrosurgical Pencil Mode にて設定可能)
- ・ 使いやすいタッチパネルは直感的な操作が可能であり、手袋をはめた状態でも操作可能です。
- ・ フィルターのポートにはカバーが付いており、スタッフの方が汚染されたポートに接触するというリスクを軽減します。
- ・ 吸吸引設定は 10% ずつ、簡単に調整ができます。

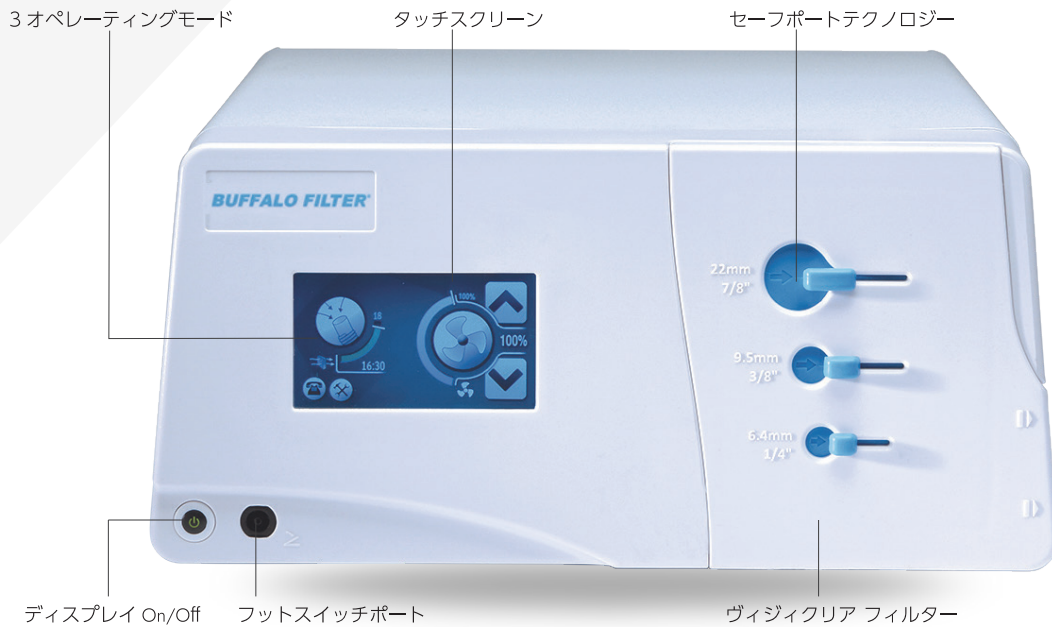

### 仕様

寸法	幅 35.4cm × 奥行 40.9cm × 高さ 18.0cm
重量	フィルター非搭載時 - 6.6kg フィルター搭載時 - 7.9kg
流量	30cfm (839lpm) ※ 22mm 径チューブ使用時
ノイズ	43dBA (最小) ・ 55dBA (最大)

薬事非該当品

製品番号

製品名

入数

VC120

ヴィジクリア排煙システム  
(フィルター, フットスイッチ付)

1



- ・フィルターライフを自動的に追跡および記録します。
- ・多用途の3ポート フィルター設計は、カバーされた隠し雄型ポートを備えており、さまざまなチューブのサイズに対応して、手術とアクセサリセットの多様性を提供します。



仕様

寸法	幅 27.9cm× 奥行 39.4cm× 高さ 15.2cm
重量	フィルター非搭載時 - 4.0kg フィルター搭載時 - 5.0kg
流量	25cfm (708lpm) ※ 22mm 径チューブ使用時
ノイズ	55dBA (最大)

薬事非該当品

製品番号

製品名


入数

VV120

ヴァイロヴァック排煙システム  
(フィルター, フットスイッチ付)

1

## FILTERS

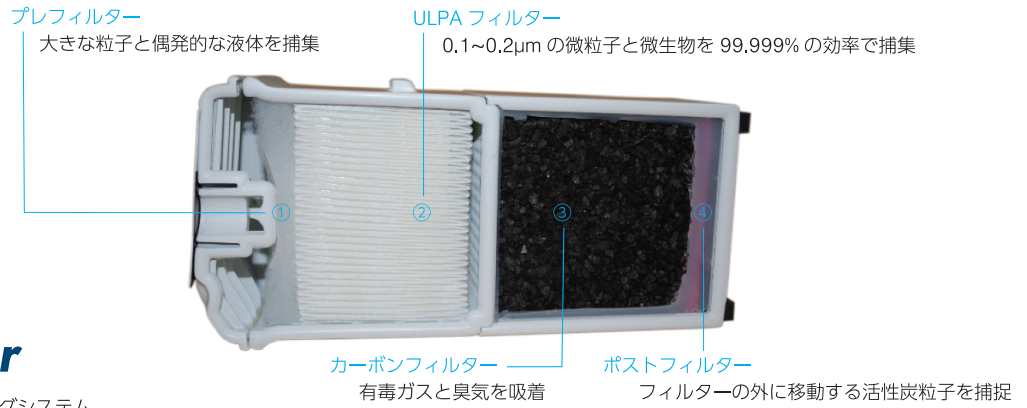

## ViroSafe Filter

◆ 4段階のフィルタリングシステム

薬事非該当品



製品番号	製品名	入数
VS135	ヴィジックリア用 ヴァイロセーフ フィルター	1

フィルターライフ 18 - 35 時間  
\* 設定によって異なります



VS353	ヴァイロヴァック用 ヴァイロセーフ フィルター	1
-------	----------------------------	---

フィルターライフ 18 - 35 時間  
\* 設定によって異なります



VSXLL04	ポータブルームセーフ 604 用 ヴァイロセーフ エクストラロング ライフフィルター	4
---------	---	---

フィルターライフ 18 時間

## In-Line Filter

薬事非該当品




製品番号	製品名	入数
BILF200	BILF200 インライン ULPA フィルター	10

- ・壁吸引システムに入る前に、サージカルスモークを捕捉します。
- ・捕集効率 99.999% の ULPA フィルターを搭載しています。
- ・ハウジングが透明なので、フィルターの交換時期の確認が容易に行えます。  
(フィルターの変色が交換時期の目安となります)

## PlumePort SEO

LAPAROSCOPIC  
SOLUTIONS

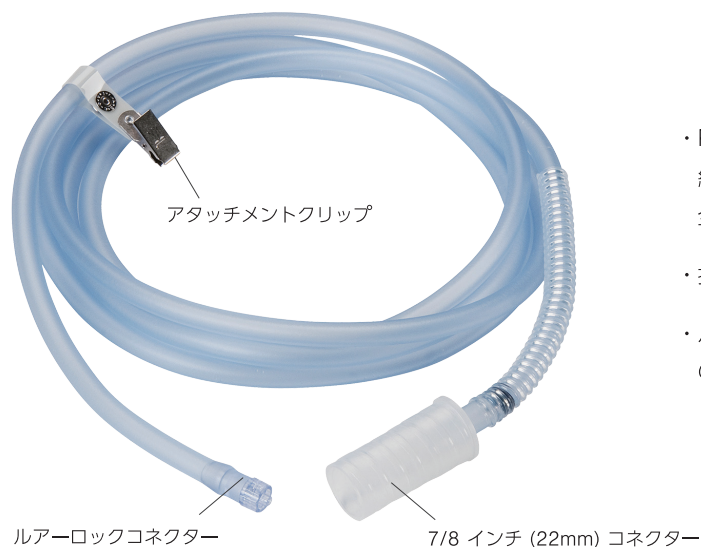


- ・ PlumePort SEO は、トロカーから排煙装置に簡単に接続して、外科手術のサージカルスモークを効率的かつ安全に除去できます。
- ・ 排煙装置本体から流量調整が可能です。
- ・ ルアーロック フィッティングを搭載しており、ほとんどの排煙装置に接続できます。

販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036

製品番号	製品名	入数
PP012SEO	プルームポート SEO	12

## PlumePort ActiV

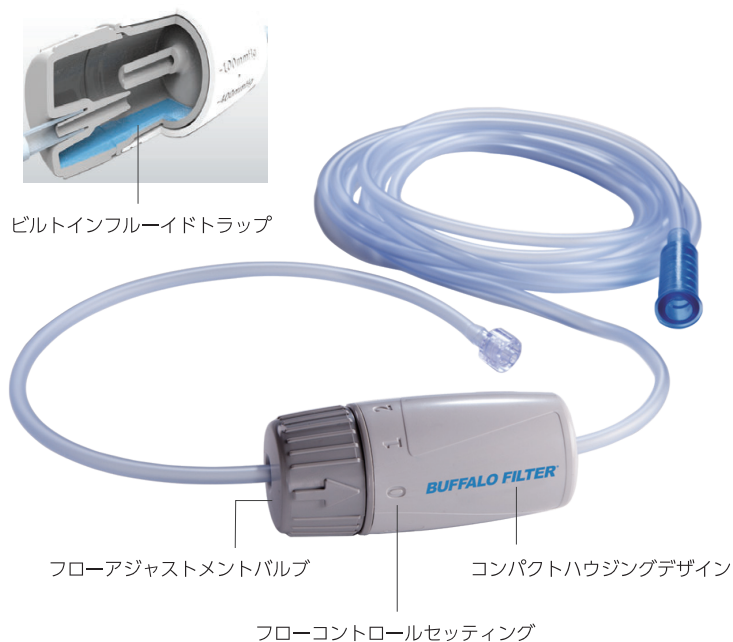

- ・ 捕集効率 99.999% の ULPA フィルター (活性炭入り) を搭載しております。
- ・ 外科手術中に発生するサージカルスモークを軽減することが可能です。
- ・ 片手操作で流量調整が可能です。(4段階で流量の調整ができます)
- ・ 液体トラップ内蔵により、フィルター手前で水分を捕獲することができます。
- ・ トロカーとサクシジョンボトルの間に繋ぐだけで簡単にご使用できます。


販売名：Buffalo Filter チューブ 2 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001038

製品番号	製品名	入数
PP010CS	プルームポート ActiV	10

## PENCILS

### ➤ **PlumePen Elite**

- ・チューブがしなやかであり且つ、シームレス構造により一体化し、ペンシルとの接続部は 360°回転することで、手の疲労、緊張を軽減します。
- ・PlumePen エリートは、排煙スリーブの伸縮調整が可能です。

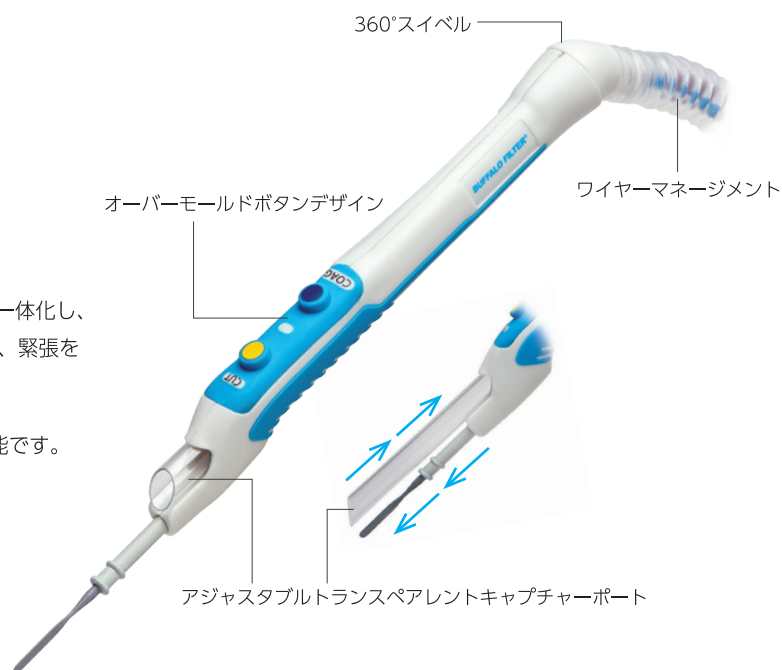

販売名：Buffalo Filter(排煙機能付きペンシル) 医療機器製造販売認証番号：301ALBZX00014000

製品番号	製品名	入数
PLP1020	PlumePen エリート (Stainless Steel ESU Blade)	20
PLP2020	PlumePen エリート (Non-Stick ESU Blade)	20

### ➤ **SnapEvac**

- ・電気メス本体をアタッチして使用しながら、排煙をすることができます。
- ・コスト的にも経済的であり且つ、軽量チューブです。
- ・人間工学に基づいて設計された、電気メス用排煙ペンシルアダプターです。



販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036

製品番号	製品名	入数
SNAPEVAC20	SnapEvac 電気メスパンシル用排煙アダプタ	20

## ➤ 22mm Tubing with Wand and Sponge Guard

販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036



製品番号	製品名	入数
VTWT424	22mm×1.8m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24
VTWT624	22mm×3.0m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24
VTWT805	22mm×4.3m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	5

## ➤ 9.5mm Smoke Evacuation Tubing

販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036



製品番号	製品名	入数
VT38S1010	9.5mm×3.0m 排煙チューブ	10

## ACCESSORIES

薬事非該当品

	製品番号	製品名	入数
	FS10004	フットスイッチ	1
	EZLINK01	EZLink	1
 容量 100CC	VSFT10	液体トラップ	10
	ARMSTAND	アームスタンド	1
 ※天然ゴムラテックス不使用	DCCM01	ダイレクトコネクタケーブル Commed 電気メス用	1
 ※天然ゴムラテックス不使用	DCCOV01	ダイレクトコネクタケーブル Covidien 電気メス用	1

# Ordering Information

製品番号

製品名

入数

JAN コード

## Surgical Smoke Evacuators

VC120	ヴィジィクリア排煙システム (フィルター, フットスイッチ付)	1	0815198012069
VV120	ヴァイロヴァック排煙システム (フィルター, フットスイッチ付)	1	0851136002815

## Filters

VS135	ヴィジィクリア用 ヴァイロセーフ フィルター	1	0815198012052
VS353	ヴァイロヴァック用 ヴァイロセーフ フィルター	1	0815198012533
VSXLL04	ヴァイロセーフ エクストラロング ライフフィルター	4	0851136002037
BILF200	BILF200 インライン ULPA フィルター	10	0851136002327

## Laparoscopic Solutions

PP012SEO	プルームポート SEO	12	0851136002426
PP010CS	プルームポート ActiV	10	0845854081085

## Surgical Smoke Evacuation Pencils & Pencil Adapter

PLP1020	PlumePen エリート (Stainless Steel ESU Blade)	20	0815198012083
PLP2020	PlumePen エリート (Non-Stick ESU Blade)	20	0815198012090
SNAPEVAC20	SnapEvac 電気メスペンシル用排煙アダプタ	20	0815198012953

## Surgical Smoke Evacuation Tubing

VTWT424	22mm×1.8m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24	0851136002105
VTWT624	22mm×3.0m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24	0851136002068
VTWT805	22mm×4.3m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	5	0851136002525
VT38S1010	9.5mm×3.0m 排煙チューブ	10	0851136002884


## Accessories

FS10004	フットスイッチ	1	0851136002969
EZLINK01	EZLink	1	0815198011079
VSFT10	液体トラップ	10	0815198012137
ARMSTAND	アームスタンド	1	0851136002631
DCCM01	ダイレクトコネクタケーブル Conmed 電気メス用	1	0845854081252
DCCOV01	ダイレクトコネクタケーブル Covidien 電気メス用	1	0845854081283



A series of horizontal blue dashed lines for writing, starting from the top right of the virus icon and extending across the page. A vertical dashed orange line descends from the bottom of the virus icon, connecting to the first horizontal line. On the left side, there is a grey triangular shape pointing right, with a small blue and white geometric pattern at its tip.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed blue lines.

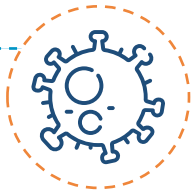



製造販売元



コンメッド・ジャパン株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋5-20-4 新虎サウスビル8階  
TEL : 03-6435-8170 FAX : 03-6435-8407

販売元



〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2  
TEL : 047-480-6161 [www.meilleur.co.jp](http://www.meilleur.co.jp)