

## PACKAGE MONITORING INDICATOR

## 包装内部用CI

## 滅菌条件の達成を確認する。

包装内部用CIは、器材と一緒に滅菌バッグやコンテナに入れて使用します。それが置かれた場所において、滅菌条件が達成されているかを示します。



## 高圧蒸気滅菌用タイプ5CI


高圧蒸気滅菌用の包装内部用化学的インジケータです。EN ISO 11140-1 タイプ5に適合しています。

幅広い温度帯においてBIの死滅との相関を有し、蒸気滅菌の3つの重要プロセス変数(飽和蒸気・温度・時間)の全てに反応します。裏面がシール状になっており、台帳にそのまま貼ることができます。

包装内インジケータは、「それが置かれた場所」の情報しか確認することができません。内腔構造のある器材などは、別途コンパクトPCDで内腔レベルまでの滅菌を確認する必要があります。

- SV値: 135°C 3分、128°C 8分、121°C 16.5分
- インジケータ変色: 黄 ● → 黒 ●

製品番号	製品名	規格	入数	JANCD
GKE211-226-JPS	高圧蒸気滅菌用タイプ5CI	EN ISO11140-1 タイプ5適合	3200枚	4580199006930

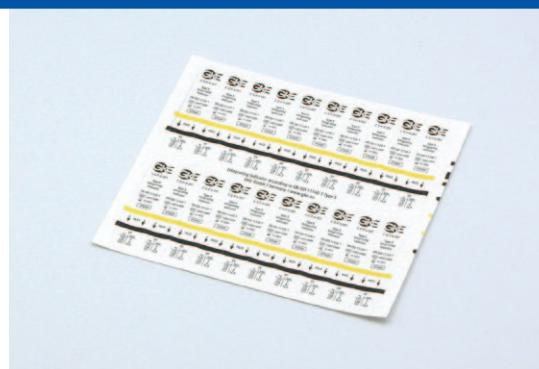

インジケータサイズ [原寸] 長さ65mm/幅14mm




## 過酸化水素ガス滅菌用タイプ4CI

過酸化水素ガス滅菌用の包装内インジケータです。EN ISO 11140-1 タイプ4に適合しています。

滅菌器やプログラムに応じて4つの異なるSV値から選ぶことができます。裏面がシール状になっており、台帳にそのまま貼ることができます。



インジケータサイズ [原寸] 長さ65mm/幅14mm

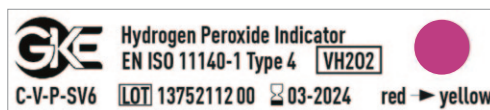

製品番号	SV値	インジケータ変色	規格	入数	JANCD
GKE214-251-ENS	2.6mg/L、2分、50°C	赤 ● → 黄 ●	EN ISO11140-1 タイプ4適合	400枚	4580199009580
GKE214-241-ENS	2.6mg/L、8分、50°C	青 ● → 緑 ●			4580199009337
GKE214-261-ENS	2.6mg/L、15分、50°C	赤 ● → 橙 ●			4580199009603
GKE214-221-ENS	3.8mg/L、20分、50°C	青 ● → 緑 ●			4580199005582

