

CLEANING PROCESS INDICATOR

洗浄工程インジケータ

インジケータを「選択」という新提案。

機械洗浄では、部品の消耗や誤った洗剤の注入などにより、適切に洗浄できないことが起こりえます。だからこそ、毎回の洗浄をモニタリングすることが重要です。適切に洗浄されていない器材は、次の工程に進めてはいけません。


それらの不具合を確実に検知するためには、それぞれの洗浄器やプログラムにあった最適なインジケータを選択することが重要です。

洗浄工程インジケータ

それぞれのウォッシャーディスインフェクター (WD) やプログラムに適したインジケータを、5種から選択する唯一の洗浄工程インジケータです。

スプレーアームの不具合や、誤ったプログラムの選択を検知します。予備洗浄で色落ちすることがなく、洗剤関連の不具合も見逃しません。

マルチモデルは、複数のプログラムを1つのインジケータでモニタリングすることができます。

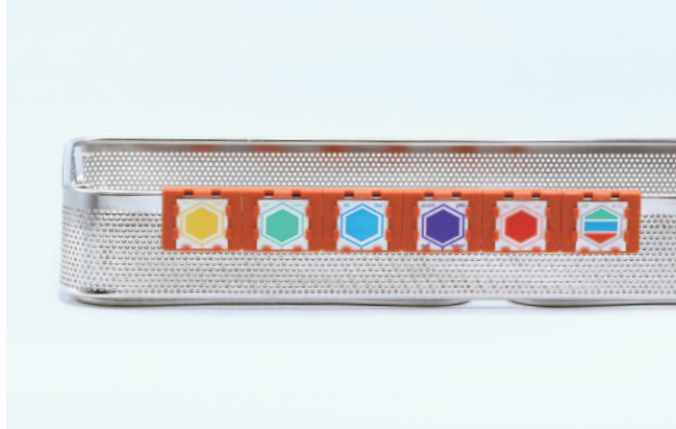

インジケータサイズ 28mm×28mm

※裏面シールタイプ



製品番号	色	製品名	入数	JANCD
GKE810-101-ENS	黄	洗浄工程インジケータ (黄)	320枚	4580199009023
GKE810-201-ENS	緑	洗浄工程インジケータ (緑)		4580199005650
GKE810-301-ENS	青	洗浄工程インジケータ (青)		4580199005667
GKE810-351-ENS	紫	洗浄工程インジケータ (紫)		4580199009689
GKE810-401-ENS	赤	洗浄工程インジケータ (赤)		4580199005674
GKE810-901-ENS	マルチ	洗浄工程インジケータ (マルチ)		4580199005643

動画 ▶





- インジケータの選定方法
- 使用方法

インジケータホルダー

洗浄工程インジケータを、バスケットに取り付けるためのホルダーです。プラスチック製。


製品番号	製品名	入数	JANCD
GKE800-102-ENS	インジケータホルダー	10個	4580199005605

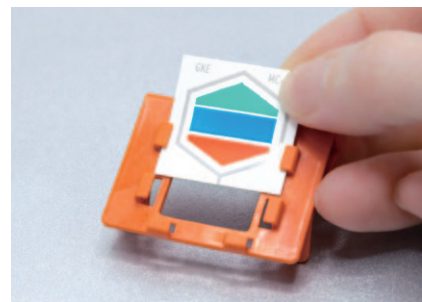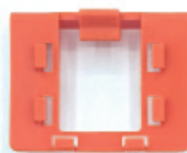

内腔洗浄フローPCD

チューブなどの内腔器材の洗浄工程を確認するためのフローPCDです。WDの洗浄ポートに接続して使用します。

内腔器材の内部まで洗浄できているかは、バスケットに設置されたインジケータでは確認することができません。専用のフローPCDを使用してきちんとモニタリングすることが大切です。

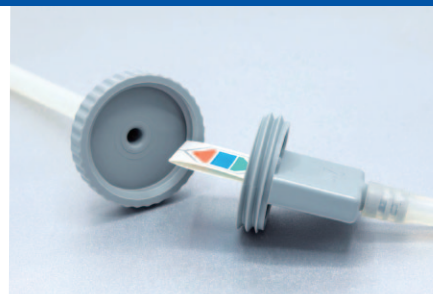

洗浄ポートに設置した
フローPCD

製品番号	製品名	入数	JANCD
GKE800-111-ENS	内腔洗浄フローPCD	1組	4580199006435

超音波 洗浄工程インジケータ


超音波の強度だけでなく、洗剤の供給もモニタリングできるインジケータです。

超音波洗浄の評価は、超音波の強度だけでは不十分です。それぞれの超音波洗浄器の洗浄力にあった、最適なインジケータを4種から選択できます。



インジケータサイズ 125mm×55mm


※裏面シールタイプ

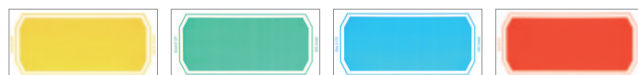

製品番号	色	製品名	入数	JANCD
GKE810-112-ENS	黄	超音波洗浄工程インジケータ(黄)	120枚	4580199009221
GKE810-212-ENS	緑	超音波洗浄工程インジケータ(緑)		4580199009238
GKE810-312-ENS	青	超音波洗浄工程インジケータ(青)		4580199009245
GKE810-412-ENS	赤	超音波洗浄工程インジケータ(赤)		4580199009252

インジケータスタンド

超音波洗浄工程インジケータのホルダーです。タンクの深さに合わせて長さを選べます。また、必要に応じて組み合わせて使用できます。

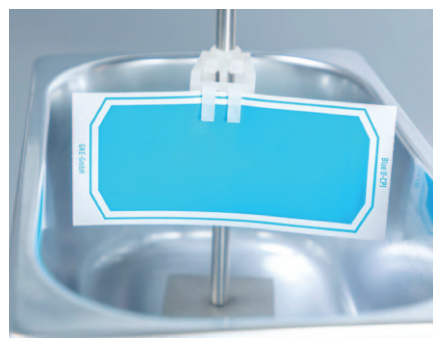

製品番号	製品名	入数	JANCD
GKE800-115-ENS	7cmステンレスバー	1個	4580199009269
GKE800-116-ENS	20cmステンレスバー	1個	4580199009276
GKE800-117-ENS	40cmステンレスバー	1個	4580199009283

