

名優サククションチップ

(ディスポ吸引管)

名優サククションチップの特長

- ▶ **卓越したサイズラインナップの豊富さ。**
耳鼻科をはじめ様々な部署で適したものをお選びいただけます。
- ▶ **先端のなめらかな加工**により組織損傷を抑えた愛護的な手技を可能にします。
- ▶ **先端の角度を自由に変えられる**ベンダーの取り扱いがあります。

Dedicated to
SURGICAL SITE INFECTION PREVENTION

名優サクションチップ (ディスク吸引管)

単位:mm

耳鼻科領域以外にもさまざまな部署でご使用いただけます



外径	品番	長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
0.4	6066500040	70	ルアロック	60	13,000円
	6066500045	80		60	14,000円
	* 6066507040	77		10	6,000円
0.7	6066500070	70		60	13,000円
	6066500072	80		60	14,000円
1.0	6066500100	70		60	14,000円
	6066500102	80		60	14,000円
	6066509100	100		30	8,000円
1.2	6066500120	70		60	14,000円
	6066500122	80		60	15,000円
	6066509122	100		30	8,000円
1.4	6066500140	70		60	15,000円
	6066500142	80		60	16,000円
	6066509140	100		30	8,000円
	6066501140	70	ラウンド	60	18,000円
	6066501180 *	80		60	18,000円
1.7	6066501100	100		30	14,000円
	6066500170	70	ルアロック	60	15,000円
	6066500172	80		60	16,000円
	6066509170	100		60	17,000円
2.0	6066500208	70		60	15,000円
	6066500200	80		60	16,000円
	6066509200	100		30	9,000円
	6066502140 *	70	ラウンド	60	16,000円
	6066502200 *	80		60	18,000円
2.5	6066502100	100		30	9,000円
	6066500250	80		30	11,000円
	6066509250 *	100		30	11,000円
3.0	6066500300	80		30	15,000円
	6066509300 *	100		30	16,000円
4.0	6066500400	80		30	18,000円

※印のついた品番は受注発注品です

セット品番は異なるサイズがひとまとめになっているため手術時におすすめです

※(外径) x (長さ)

セット品番	入数	税抜定価	セット内訳						ハンドル
			0.4 x 70	0.7 x 70	1.0 x 70	1.4 x 70	2.0 x 70	3.0 x 80	
6066502712	30	54,000円	2本	2本	2本	2本	1本	1本	6066500990
6066502713	30	30,000円	-	1本	1本	1本	1本	-	6066500990
6066502705	30	30,000円	-	1本	1本	1本	1本	-	6066500991
6066502707	30	54,000円	2本	2本	2本	2本	2本	-	-

ハンドル

品番	仕様	入数	税抜定価
606650992	ユニット用/圧調整孔あり	30	9,000円
606650509	ユニット用/圧調整孔なし	30	9,000円
6066500990	吸引チューブ用/連結チューブ対応/圧調整孔あり	25	8,000円
6066500991	吸引チューブ用/圧調整孔あり	25	8,000円

サクションチップをお好きな角度に曲げられます

ベンダー

品番	仕様	入数	税抜定価
6066501	サクションチップ用ベンダー/外径1.0~4.0mm対応	1	15,000円

ルアロック

- ・ハンドルに差し込むとしっかりと固定されて使用できる。
- ・手元で圧調整がしたい場合に適している。
- ※チューブにも直接接続できるが固定はされない。

ラウンド

- ・主にチューブに直接接続して使用する。
- ・手元で圧調整が不要な場合に適している。
- ※ハンドルにも差し込めるが固定されず左右に振れる。

サイズ選択の参考



*品番:6066507040
0.7 / 0.4 mm

耳硬化症に対して行う
アブミ骨手術時 など

0.4~1.0mm

デリケートで狭い部分での
吸引・インプラントの保持・
視界の確保などに。
Ex.耳小骨形成術

1.2~1.7mm

血液や体液の吸引などに

1.7~2.5mm

術前の外耳道の掃除などに。

2.0~4.0mm

創面切除した骨・
血液の吸引などに。
パワーツール使用時、
フラッシュした際に。

セット品番：6066502712



【Ex.鼓室形成術時など】

- インプラント挿入時
0.4 x 70mm
- 耳小骨形成時
0.7 x 70mm
- 外耳道洗浄時
1.0 x 70mm 1.4 x 70mm
2.0 x 70mm 3.0 x 80mm

ハンドル
各種


ベンダー

※ベンダーの使用方法是
最終ページにあります。

名優サクションチップ (ディスポ吸引管)

耳鼻科領域以外にもさまざまな部署でご使用いただけます

※印のついた品番は
受注発注品です

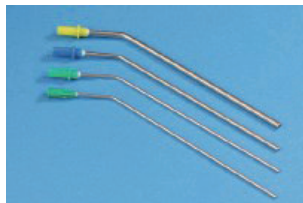

単位:mm

ハンドルなしのタイプで圧調整不要な場合におすすめです

外径	品番	長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
2.0	6066516020 ※	150	ルアロック	40	22,000円
	6066502150	150		40	22,000円
3.0	6066516030	150	ラウンド	40	32,000円
4.0	6066516040	150		40	38,000円



様々なシーンでの吸引に使っていただけます

品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
6066516120 ※	2.0 x 150	透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	18,000円
6066516130 ※	3.0 x 150		25	22,000円
6066516140 ※	4.0 x 150		25	23,000円
6066509120 ※	2.0 x 110		25	16,000円
6066509125 ※	2.5 x 110		25	19,000円
6066509130 ※	3.0 x 110		25	21,000円
6066509135	3.5 x 110		25	23,000円

FERGUSON 型



より滑らかなカーブが特長です

品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
6066501020	2.0 x 150	FERGUSON型 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	21,000円
6066501030	3.0 x 150		25	22,000円
6066501040	4.0 x 150		25	23,000円
6066511020	2.0 x 150	FERGUSON型 側孔付 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	30,000円
6066511030 ※	3.0 x 150		25	36,000円
6066511040 ※	4.0 x 150		25	42,000円

FRAZIER 型



60° の曲がり方が術者に十分なスペースと視野を与えます

品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
6066508020	2.0 x 120	FRAZIER型 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	21,000円
6066508030 ※	3.0 x 120		25	22,000円
6066508040	4.0 x 120		25	23,000円

ENDO 型



先端が丸く膨らんでおり組織を傷つけにくい形状をしています
内視鏡下副鼻腔手術時に副鼻腔の自然孔から挿入することを想定しています

品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
6066503020	2.0 x 120	ENDO型 ベングリップ式 透明ハンドル付 (圧調整孔なし)	25	39,000円
6066503025	2.5 x 120		25	39,000円
6066503030	3.0 x 120		25	39,000円
6066503035	3.5 x 120		25	39,000円

ZOELLNER 型



浅めの角度で前頭洞にまで到達させることができます

品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
6066504020 ※	2.0 x 130	ZOELLNER型 ベングリップ式 透明ハンドル付 (圧調整孔なし)	25	17,000円
6066504025 ※	2.5 x 130		25	19,000円
6066504030 ※	3.0 x 130		25	22,000円
6066514025 ※	2.5 x 90	ZOELLNER型 透明ハンドル付 (圧調整孔なし)	25	15,000円

名優サクションチップ
(ディスポ吸引管)


耳鼻科領域以外にもさまざまな部署でご使用いただけます。

曲げられる特長によって咽頭などの狭く奥まったエリアにも到達でき
術者にしっかりと視野を与えます

単位:mm

品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	税抜定価
6061616232VC	2.0 x 300	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	25,000円
6061616233VC	3.0 x 300	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	26,000円
6061616234VC	4.0 x 300	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	29,000円
6061616242VC	2.0 x 400	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	26,000円
6061616243VC	3.0 x 400	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	27,000円
6061616244VC	4.0 x 400	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	29,000円

ベンダーの使用方法

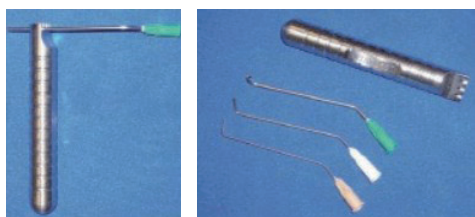


1. 使用するサクションチップのサイズに合ったベンダーの孔を選択します。
2. 1.で選択した孔にサクションチップをお好みの位置まで差し込みます。
3. てこの原理で曲げたい角度まで親指を使って曲げます。

リユース内腔器材の洗浄不良による感染症の事例

ヒューストンのメソジスト病院にて、肩の回旋筋腱板手術を受けた患者が重度のSSIを起こし再手術となった。CDC（米国疾病予防管理センター）の調査員が原因を追究したところ、骨や組織の切削に使用する関節鏡シェーバー（内腔があり洗浄・吸引も同時に行える）に組織や骨等が詰まっていることを確認した。

当病院のリユースタイプの吸引管350個の内腔をビデオカメラを使用して調査し、血液・骨片・組織・錆びなどによって350個全てが汚染されていることが分かった。

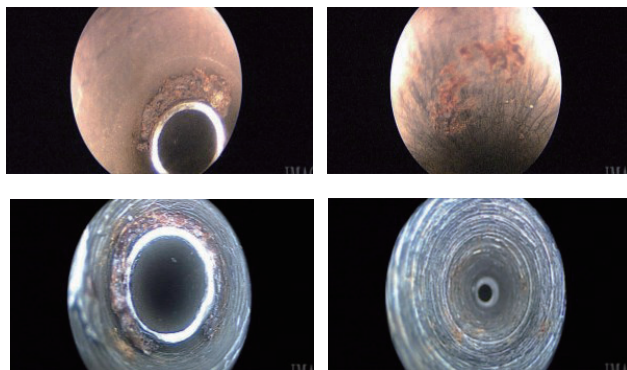

▲ リユースタイプの内腔器材の内部を観察した実際の写真

『リユース内腔器材の洗浄不良による感染症の事例』引用元URL:

<https://publicintegrity.org/health/filthy-surgical-instruments-the-hidden-threat-in-americas-operating-rooms/#17>